




## AUTOCLAVE PORTABLE DE 18 L.

### Description :

Autoclave d'une contenance de 18 litres avec **chauffage mixte** (électrique intégré ou brûleur externe).

### Croquis technique :

- 1 Soupape de sécurité
- 2 Poignée isolante
- 3 Soupape d'échappement
- 4 Tuyau flexible
- 5 Couvercle
- 6 Ecrou de fermeture du couvercle
- 7 Corps extérieur de l'autoclave
- 8 Poignée de transport
- 9 Panier à stérilisation
- 10 Elément chauffant
- 11 Manomètre de contrôle de la pression

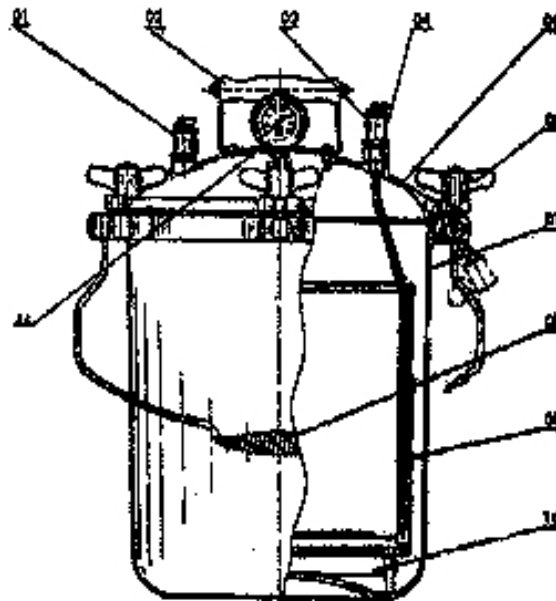

### Spécifications techniques :

**Chauffage :** l'autoclave est équipé d'un corps chauffant électrique immergé. L'autoclave peut être chauffé à l'aide d'autres sources de chaleur (brûleur au gaz, pétrole, source électrique externe, ...)

**Cuve :** cuve en acier d'aluminium.

Diamètre du panier à stérilisation :	26 cm
Hauteur du panier à stérilisation :	26 cm
Volume de la chambre :	18 litres
Pression maximale de sécurité :	0.14 Mpa
Puissance de l'élément chauffant :	3 kW
Tension d'alimentation :	220/240 Volts
Poids net :	12 kg